

## 中華民國醫師公會全國聯合會 函

地址：10688台北市大安區安和路一段29號  
9樓

承辦人：陳仕翰

電話：(02)27527286-134

傳真：(02)2771-8392

Email：leochen6215@mail.tma.tw

受文者：社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期：中華民國111年12月30日

發文字號：全醫聯字第1110002427號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1110002427\_Attach1.pdf、1110002427\_Attach2.pdf)

主旨：轉知衛生福利部疾病管制署函送「傳染病檢體採檢項目與時間及送驗方式一覽表」公告掃描檔(含附件)，請轉知所屬會員知悉，請查照。

說明：

- 一、依衛生福利部疾病管制署111年12月29日疾管檢驗字第1111301126號函辦理。
- 二、本函訊息刊登本會網站。

正本：各縣市醫師公會

副本：

理事長 周慶明

檔 號：  
保存年限：

## 衛生福利部疾病管制署 函

地址：10050台北市中正區林森南路6號  
聯絡人：陳柔涵  
聯絡電話：27850513#520  
電子信箱：jouhan@cdc.gov.tw

受文者：中華民國醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國111年12月29日

發文字號：疾管檢驗字第1111301126號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：（ ）

附件：「傳染病檢體採檢項目與時間及送驗方式一覽表」公告掃描檔（11113011260-1.pdf）


主旨：檢送「傳染病檢體採檢項目與時間及送驗方式一覽表」公告掃描檔(含附件)，請轉知轄區醫療院所/所屬會員，請查照。

說明：

- 一、依據傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法第三條第二項規定辦理。
- 二、本次修正內容為流行性腦脊髓膜炎新增採檢項目「皮膚病灶」。

正本：國防部軍醫局、中華民國醫師公會全國聯合會、社團法人中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會、臺灣醫學會、臺灣兒科醫學會、中華醫學會、臺灣公共衛生學會、臺灣醫院協會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、地方政府衛生局

副本：

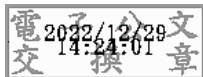

## 衛生福利部疾病管制署 公告

發文日期：中華民國111年12月29日  
發文字號：疾管檢驗字第1111301125號  
附件：傳染病檢體採檢項目與時間及送驗方式一覽表



主旨：公告「傳染病檢體採檢項目與時間及送驗方式一覽表」  
(附件)，自即日生效，並同日廢止本署111年7月19日疾  
管檢驗字第1111300551號公告。

依據：

- 一、傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法第三條第二項。
- 二、衛生福利部105年8月10日部授疾字第1050100804號公  
告。

署長 周志浩

傳染病檢體採檢項目與時間及送驗方式一覽表

| 傳染病名稱*            | 採檢項目                 | 採檢時間                    | 送驗方式**                      |
|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 天花                | 水疱液、膿疱內容物及瘡痂         | 發燒期<br>(第1-3日)          | 2-8°C<br>(A類感染性物質 P620包裝)   |
| 鼠疫                | 淋巴液                  | 淋巴結呈現漲大                 | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|                   | 抗凝固全血 (EDTA)         | 急性期<br>(未投藥前立即採檢)       |                             |
|                   | 血清                   | 急性期；恢復期 (4-6週)          | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|                   | 痰液                   | 咳嗽發作及咳痰排出時<br>(投藥前立即採檢) |                             |
|                   | 咽喉擦拭液 (有食用鼠肉習慣之人或動物) | 配合流行病學調查                |                             |
| 蚤類                | 宿主體上有蚤類              | 2-8°C<br>(無包裝規範)        |                             |
| 嚴重急性呼吸道症候群 (SARS) | 咽喉擦拭液                | 發病5日內                   | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|                   | 痰液                   |                         |                             |
|                   | 糞便                   | 發病7日後                   |                             |
|                   | 血清                   | 急性期 (發病1-5日)            |                             |
| 狂犬病               | 唾液                   | 立即採檢                    | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|                   | 血清                   |                         |                             |
|                   | 腦脊髓液                 |                         |                             |
|                   | 皮膚切片                 |                         |                             |
| 炭疽病               | 抗凝固全血 (肝素)           | 未投藥前立即採檢                | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|                   | 水疱液                  |                         |                             |
|                   | 皮膚傷口 (焦痂)            |                         |                             |
|                   | 腦脊髓液                 |                         |                             |
|                   | 鼻咽腔分泌物               |                         |                             |
|                   | 血清                   | 立即採檢                    | 2-8°C                       |

| 傳染病名稱*      | 採檢項目           | 採檢時間                         | 送驗方式**                      |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
|             |                |                              | (B類感染性物質 P650包裝)            |
|             | 環境檢體           | 懷疑曝露於污染環境時                   | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
| 白喉          | 咽頭、喉頭及鼻黏膜之病灶偽膜 | 臨床診斷為疑似病例時                   | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
| 傷寒          | 全血             | 未投藥前之發燒期間                    | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|             | 肛門拭子或糞便        | 未投藥前立即採檢                     | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|             | 尿液(中段)         |                              |                             |
|             | 疑似菌株           | 已分離菌株時                       |                             |
|             | 確認菌株           | 認可檢驗機構確認的菌株                  |                             |
|             | 自來水環境檢體        | 配合案例調查                       | 2-8°C<br>(無包裝規範)            |
| 井水、水溝水等環境檢體 |                |                              |                             |
| 副傷寒         | 全血             | 未投藥前之發燒期間                    | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|             | 肛門拭子或糞便        | 未投藥前立即採檢                     | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|             | 尿液(中段)         |                              |                             |
|             | 疑似菌株           | 已分離菌株時                       |                             |
|             | 確認菌株           | 認可檢驗機構確認的菌株                  |                             |
|             | 自來水環境檢體        | 配合案例調查                       | 2-8°C<br>(無包裝規範)            |
| 井水、水溝水等環境檢體 |                |                              |                             |
| 登革熱         | 血清             | 急性期(發病7日內);<br>恢復期(發病14-40日) | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |

| 傳染病名稱*              | 採檢項目          | 採檢時間                       | 送驗方式**   |
|---------------------|---------------|----------------------------|--|
| 流行性腦脊髓膜炎            | 全血（需置入嗜氧性血瓶中） | 未投藥前立即採檢                   | 22-35°C<br>（B類感染性物質 P650包裝），<br>全血和腦脊髓液無法2小時內送達實驗室時，請先放37°C培養箱，隔夜後再送出。 |
|                     | 腦脊髓液          |                            |  |
|                     | 皮膚病灶          |                            |  |
|                     | 疑似菌株          | 已自血液或腦脊髓液分離菌株時             |  |
|                     | 確認菌株          | 認可檢驗機構確認的菌株（分自血液或腦脊髓液）     |  |
| 桿菌性痢疾               | 肛門拭子或糞便       | 未投藥前立即採檢                   | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝）  |
|                     | 抗凝固全血         |                            |  |
|                     | 尿液            |                            |  |
|                     | 疑似菌株          | 已分離菌株時                     | 2-8°C<br>（志賀式痢疾桿菌第一型 A類感染型物質 P620包裝；其他型別 B類感染性物質 P650包裝）               |
|                     | 確認菌株          | 認可檢驗機構確認的菌株                |  |
| 阿米巴性痢疾              | 已固定染色之糞便      | 符合病例定義時                    | 22-35°C<br>（三層包裝）  |
|                     | 新鮮糞便          |                            | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝）  |
|                     | 膿瘍            |                            |  |
| 小兒麻痺症/急性無力肢體麻痺（AFP） | 糞便            | 發病14日內採取2次糞便檢體，2份檢體隔日或連日採取 | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝）  |
|                     | 咽喉擦拭液         | 發病14日內採集咽喉擦拭液1次            |  |
| 瘧疾                  | 血片（厚層及薄層）     | 符合病例定義或緊急通報瘧疾病例            | 22-35°C<br>（三層包裝）  |
|                     | 抗凝固全血（EDTA）   | 符合病例定義                     | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝）  |

| 傳染病名稱*       | 採檢項目           | 採檢時間                           | 送驗方式**                    |
|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 麻疹           | 抗凝固全血（肝素或EDTA） | 急性期（發病7日內）；<br>恢復期（發病14-40日）   | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝） |
|              | 咽喉擦拭液          | 急性期（發病7日內）                     |                           |
|              | 尿液             |                                |                           |
| 急性病毒性A型肝炎    | 血清             | 急性期（立即採檢）；<br>恢復期（距第一次採血日14日後） | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝） |
|              | 糞便             | 發病後14日內之確定病例或疑似群聚案件時           |                           |
| 漢他病毒症候群      | 血清             | 急性期（立即採檢）；<br>恢復期（發病14-40日）    | 2-8°C<br>（A類感染性物質 P620包裝） |
|              | 老鼠血清           | 配合案例調查                         |                           |
| 腸道出血性大腸桿菌感染症 | 肛門拭子或糞便        | 立即採檢                           | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝） |
|              | 疑似菌株           | 已分離菌株時                         |                           |
|              | 確認菌株           | 認可檢驗機構確認的菌株                    |                           |
| 德國麻疹         | 血清             | 急性期（發病7日內）；<br>恢復期（發病14-40日）   | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝） |
|              | 咽喉擦拭液          | 發病7日內                          |                           |
| 屈公病          | 血清             | 急性期（發病7日內）；<br>恢復期（發病14-40日）   | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝） |
| 霍亂           | 肛門拭子或糞便        | 未投藥前立即採檢                       | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝） |
|              | 嘔吐物            |                                |                           |
|              | 疑似菌株           | 已分離菌株時                         |                           |
|              | 確認菌株           | 認可檢驗機構確認的菌株                    |                           |
|              | 水樣環境檢體         | 配合案例調查                         |                           |

| 傳染病名稱*       | 採檢項目                   | 採檢時間                         | 送驗方式**                    |
|--------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|
|              |                        |                              | (無包裝規範)                   |
|              | 非水樣環境檢體                |                              | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
| 多重抗藥性<br>結核病 | 藥敏試驗初判為多重抗藥性菌株         | 配合案例調查                       | 2-8°C<br>(A類感染性物質 P620包裝) |
|              | 臨床上呼吸道檢體(含痰檢體及上呼吸道沖洗液) |                              | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
| 西尼羅熱         | 血清                     | 急性期(發病7日內);<br>恢復期(發病14-40日) | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|              | 腦脊髓液                   | 住院期間                         |                           |
| 流行性斑疹傷寒      | 抗凝固全血(肝素或EDTA)         | 急性期<br>(未投藥前立即採檢)            | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
| 茲卡病毒感染症      | 血清                     | 急性期(發病七日內);<br>恢復期(發病14-40日) | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|              | 尿液                     | 發病1~14日採檢                    |                           |
|              | 體液(如羊水、臍帶血、唾液、脊髓液)     | 急性期(發病7日內採檢)                 |                           |
| 猴痘           | 水疱液                    | 發燒期(第1-3日)                   | 2-8°C<br>(A類感染性物質 P620包裝) |
|              | 膿疱內容物及瘡痂               |                              |                           |
|              | 咽喉擦拭液                  |                              |                           |
|              | 血清                     |                              |                           |
|              | 全血                     |                              |                           |
| 百日咳          | 鼻咽腔後部分泌物               | 未投藥前立即採檢                     | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|              | 核酸                     | 分生檢測陽性時                      |                           |



| 傳染病名稱*          | 採檢項目    | 採檢時間                         | 送驗方式**                      |
|-----------------|---------|------------------------------|-----------------------------|
|                 | 確認菌株    | 認可檢驗機構確認的菌株                  |                             |
| 日本腦炎            | 血清      | 急性期（立即採檢）；<br>恢復期（發病14-40日）  | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝）   |
|                 | 腦脊髓液    | 住院期間                         |                             |
| 結核病（除多重抗藥性結核病外） | 痰液      | 初次驗痰（未投藥前）                   | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝）   |
|                 | 菌株      | 配合案例調查                       | 2-8°C<br>（A類感染性物質 P620包裝）   |
| 先天性德國麻疹症候群      | 尿液      | 出生後12個月內                     | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝）   |
|                 | 咽喉擦拭液   |                              |                             |
|                 | 血清或臍帶血  |                              |                             |
| 急性病毒性肝炎（除A型外）   | 血清      | 立即採檢                         | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝）   |
| 流行性腮腺炎（群聚感染）    | 頰腔擦拭液   | 發病7日內                        | 2-8°C<br>（B類感染性物質 P650包裝）   |
|                 | 血清      | 急性期（發病7日內）；<br>恢復期（發病15-30日） |                             |
| 侵襲性b型嗜血桿菌感染症    | 全血      | 未投藥前立即採檢                     | 22-35°C<br>（B類感染性物質 P650包裝） |
|                 | 腦脊髓液    |                              |                             |
|                 | 肋膜液、關節液 |                              |                             |
|                 | 疑似菌株    | 已分離菌株時                       |                             |
|                 | 確認菌株    | 認可檢驗機構確認的菌株                  |                             |
| 梅毒/先天性          | 血清      | 立即採檢                         | 2-8°C                       |

| 傳染病名稱*     | 採檢項目                    | 採檢時間                             | 送驗方式**                      |
|------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 梅毒         | 腦脊髓液                    |                                  | (B類感染性物質 P650包裝)            |
|            | 病灶滲出液                   |                                  |                             |
| 退伍軍人病      | 痰液、呼吸道分泌物、胸膜液           | 立即採檢                             | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|            | 尿液                      |                                  |                             |
|            | 血清                      | 急性期(立即採檢);<br>恢復期(4-8週)          |                             |
|            | 疑似菌株                    | 已分離菌株時                           |                             |
|            | 確認菌株                    | 認可檢驗機構確認的菌株                      |                             |
|            | 水龍頭、蓮蓬頭、飲水機、冷卻水塔等水源環境檢體 | 配合陽性案例                           |                             |
| 淋病         | 尿道、子宮頸、陰道、咽喉分泌物、直腸檢體    | 立即採檢                             | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|            | 尿液                      |                                  | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|            | 確認菌株                    | 認可檢驗機構確認的菌株                      | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
| 人類免疫缺乏病毒感染 | 抗凝固全血(EDTA)             | 疑似之高危險群經初篩呈陽性反應者, 及臨床疑似 HIV 感染者。 | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
| 漢生病        | 石蠟包埋組織切片檢體              | 配合案例調查                           | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|            | 皮膚檢體                    |                                  |                             |
| 腸病毒感染併發重症  | 水疱液                     | 水疱液呈透明狀時                         | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|            | 腦脊髓液                    | 發病5日內                            |                             |
|            | 血清                      | 急性期(發病7日內);<br>恢復期(發病14-21日)     |                             |
|            | 咽喉或鼻咽拭子                 | 發病7日內                            |                             |
|            | 肛門拭子或糞便                 | 發病14日內                           |                             |
|            | 病毒株                     | 已分離病毒株時                          |                             |
| 疱疹 B 病毒    | 傷口擦拭液                   | 傷口未清潔處理之當日                       | 2-8°C                       |

| 傳染病名稱* | 採檢項目           | 採檢時間                         | 送驗方式**                      |
|--------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| 感染症    | 腦脊髓液           | 發病3日內                        | (B類感染性物質 P650包裝)            |
|        | 血清             | 發病3日內第一次基準血清(愈接近受傷時愈佳)       |                             |
|        |                | 恢復期(受傷後3-6週)                 |                             |
| 類鼻疽    | 喉部擦拭液或分泌物      | 發病初期(未投藥前)                   | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|        | 膿汁             |                              | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|        | 抗凝固全血(EDTA)    |                              |                             |
|        | 疑似菌株           | 已分離菌株時                       | 2-8°C<br>(A類感染性物質 P620包裝)   |
|        | 確認菌株           | 認可檢驗機構確認的菌株                  |                             |
| 鈎端螺旋體病 | 尿液(中段)         | 發病10日後,且未投藥前                 | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|        | 抗凝固全血(EDTA)    | 高熱期(發病10日內且未投藥前)             | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|        | 腦脊髓液           | 具無菌性腦膜炎症狀,發病5-10日之間          |                             |
|        | 血清             | 急性期(發病7日內);<br>恢復期(發病14-40日) | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
| Q熱     | 抗凝固全血(肝素或EDTA) | 急性期(發病14日內)                  | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|        | 血清             | 急性期(立即採檢)                    |                             |
| 肉毒桿菌中毒 | 血清             | 施打抗毒素前立即採檢                   | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|        | 糞便             | 立即採檢                         |                             |
|        | 嘔吐物            |                              |                             |
|        | 皮膚傷口           |                              |                             |
| 侵襲性肺炎  | 全血             | 未投藥前立即採檢                     | 22-35°C                     |

| 傳染病名稱*  | 採檢項目                    | 採檢時間                         | 送驗方式**                      |
|---------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 鏈球菌感染症  | 腦脊髓液、肋膜液、關節液、腹膜液等無菌部位體液 |                              | (B類感染性物質 P650包裝)            |
|         | 確認菌株                    | 認可檢驗機構確認的菌株                  |                             |
| 恙蟲病     | 抗凝固全血(肝素或EDTA)          | 急性期且未投藥前                     | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|         | 血清                      | 立即採檢                         |                             |
| 地方性斑疹傷寒 | 抗凝固全血(肝素或EDTA)          | 急性期且未投藥前                     | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|         | 血清                      | 立即採檢                         |                             |
| 萊姆病     | 皮膚傷口(遊走性紅斑)             | 臨床診斷為疑似病例                    | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|         | 腦脊髓液、關節囊液               |                              |                             |
|         | 血清                      | 發病8-30日內                     | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
| 兔熱病     | 抗凝固全血(EDTA)             | 發病初期(未投藥前)                   | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|         | 血清                      | 急性期(發病7日內);<br>恢復期(發病14-20日) | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|         | 菌株                      | 已分離菌株時                       | 2-8°C<br>(A類感染性物質 P620包裝)   |
| 水痘併發症   | 痂皮                      | 發現疑似個案, 立即採檢                 | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|         | 水泡病灶拭子                  | 水泡出現1-3日內(水泡液呈水樣透明)          | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|         | 腦脊髓液                    | 出生發現疑似先天性水痘症候群, 立即採檢         |                             |

| 傳染病名稱* | 採檢項目                   | 採檢時間                         | 送驗方式**                      |
|--------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|        | 羊水                     | 產檢發現疑似先天性水痘症候群胎兒，擇合適週期採檢。    |                             |
|        | 血清                     | 水泡出現後7日內                     |                             |
| 弓形蟲感染症 | 抗凝固全血 (EDTA)           | 未投藥前立即採檢                     | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|        | 腦脊髓液                   |                              |                             |
|        | 血清                     | 急性期 (發病7日內);<br>恢復期 (發病14日後) |                             |
| 流感併發重症 | 咽喉擦拭液                  | 發病3日內                        | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
| 庫賈氏病   | 腦脊髓液                   | 臨床測定 (EEG、MRI、CTScan) 疑似時    | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|        | 抗凝固全血 (基因型別檢測) (EDTA)  |                              |                             |
|        | 抗凝固全血 (普利昂蛋白檢測) (EDTA) | 庫賈氏病病例審查會建議時                 | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|        | 腦組織檢體                  |                              | -15°C 以下(B類感染性物質 P650包裝)    |
|        | 扁桃腺組織檢體                |                              |                             |
|        | 腦組織蠟塊檢體                |                              |                             |
|        | 扁桃腺組織蠟塊檢體              |                              |                             |
|        |                        | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)  |                             |
| 布氏桿菌病  | 抗凝固全血 (EDTA)           | 急性發燒期                        | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|        | 血清                     | 立即採檢                         | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|        | 菌株                     | 已分離菌株時                       | 2-8°C                       |

| 傳染病名稱*         | 採檢項目           | 採檢時間                        | 送驗方式**                      |
|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                |                |                             | (A類感染性物質 P620包裝)            |
| 李斯特菌症          | 全血             | 未投藥前立即採檢                    | 22-35°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|                | 腦脊髓液等無菌部位體液    |                             | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|                | 肛門拭子或糞便        | 已分離菌株時                      |                             |
|                | 疑似菌株           | 認可檢驗機構確認的菌株                 |                             |
| 發熱伴血小板減少綜合症    | 血清             | 急性期(發病7日內); 恢復期(發病14-40日之間) | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
| 裂谷熱            | 血清             | 急性發燒期                       | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
| 拉薩熱            | 血清             | 急性發燒期                       | 2-8°C<br>(A類感染性物質 P620包裝)   |
|                | 尿液             |                             |                             |
|                | 咽喉擦拭液          |                             |                             |
| 黃熱病            | 血清             | 急性期(發病7日內); 恢復期(發病14-40日)   | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
| 馬堡病毒出血熱        | 血清             | 發病7日內                       | 2-8°C<br>(A類感染性物質 P620包裝)   |
|                | 咽喉擦拭液          |                             |                             |
|                | 皮膚切片(皮膚出血或病變處) |                             |                             |
| 伊波拉病毒感染        | 血清             | 發病7日內                       | 2-8°C<br>(A類感染性物質 P620包裝)   |
|                | 咽喉擦拭液          |                             |                             |
|                | 皮膚切片(皮膚出血或病變處) |                             |                             |
| 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 | 咽喉擦拭液          | 疾病活動期                       | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝)   |
|                | 痰液或下呼吸道抽取液(為佳) |                             |                             |

| 傳染病名稱*    | 採檢項目       | 採檢時間                          | 送驗方式**                    |
|-----------|------------|-------------------------------|---------------------------|
|           | 血清         | 急性期（發病1-5日）                   |                           |
| 新型 A 型流感  | 咽喉擦拭液      | 發病3日內                         | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|           | 痰液或下呼吸道抽取物 |                               |                           |
|           | 血清         | 急性期（發病1-5日）                   |                           |
| 嚴重特殊傳染性肺炎 | 鼻咽或咽喉擦拭液   | 發病3日內                         | 2-8°C<br>(B類感染性物質 P650包裝) |
|           | 痰液或下呼吸道抽取物 |                               |                           |
|           | 血清         | 急性期（發病1-5日）；<br>恢復期(發病14-40日) |                           |

\*傳染病名稱，依中央主管機關公告並刊登行政院公報者為準。

\*\*屬於 A 類感染性物質，請依 P620 包裝規定；屬於 B 類感染性物質，請依 P650 包裝規定。上述兩種包裝規定，請參照衛生福利部感染性生物材料作業要點規範之包裝送驗方式。